

SMARTCHECK®

ITA Tecnologia 4.0 per la stabilità tartarica dei vini

ENG Technology 4.0 for assessing the tartaric stability of wines

DEU Technologie 4.0 zur Bewertung der Weinsteinstabilität der Weine

FRA Technologie 4.0 pour l'évaluation de la stabilité tartrique des vins

ESP Tecnología 4.0 para evaluar la estabilidad tartárica de los vinos

24 cm x 67 cm
(9.45 in x 26.38 in)

6"

Misura
Size
Größe
Taille
Medidas

Display
Display
Display
Écran
Pantalla



Display touch screen
Touch screen display
Touchscreen-Display
Écran tactile
Pantalla táctil

Pozzetto per l'alloggiamento del campione
Sample container
Wanne zur Aufnahme der Probe
Puits de logement de échantillon
Pocillo para el alojamiento de la muestra

Area di gestione dei fluidi
Fluid management area
Fluidverwaltungsbereich
Zone de gestion des fluides
Área de gestión de los fluidos

A

B

C

D

E

Area elettronica
Electronic area
Elektronik
Compartiment électronique
Área electrónica

Tasto accensione/spegnimento
On/off Key
Ein-/Aus-Taste
Touche d'allumage et d'extinction
Tecla de encendido/apagado

SMARTCHECK®

Tecnologia 4.0 per la stabilità tartarica dei vini.

- + Monitoraggio dei processi di stabilizzazione.
- + Guida per le decisioni ai processi di cantina.
- + Miglioramento della capacità di misurare e monitorare gli input produttivi.

DESCRIZIONE

SMARTCHECK® è un innovativo strumento ideato e realizzato grazie alle competenze interdisciplinari presenti all'interno dei laboratori di ricerca del **VASONGROUP**.

Lo strumento è in grado di effettuare una valutazione della stabilità tartarica dei vini tramite analisi che si basa sul principio del **test del minicontatto**, che prevede di seguire la caduta di conducibilità (accrescimento dei cristalli) a seguito dell'aggiunta di bitartrato di potassio in un vino sottoposto ad agitazione continua e a bassa temperatura.

L'analisi con **SMARTCHECK®** può essere condotta a 5 possibili temperature per il tempo voluto dall'operatore; questo lo rende uno **strumento "diretto"** in grado di essere usato sia per approfondimenti scientifici a carattere di studio, sia per governare le fasi produttive per mezzo dell'ottenimento di un parametro certo, anche in termini di ripetibilità.

I risultati sono visualizzabili in tempo reale su un intuitivo display a tre schermate, dove è possibile seguire il test mediante i parametri di temperatura, conducibilità iniziale, istantanea e differenziale.

PUNTI DI FORZA

- Esecuzione del test a 5 possibili temperature a scelta.
- Esecuzione del test per un tempo a scelta.
- Dimensioni contenute, facilmente posizionabile sul bancone di laboratorio.
- Area elettronica protetta da condense e ben separata da zona fluidi.
- Facilità di lavaggio della zona di gestione fluidi.
- Raffreddamento modulato e automatico di precisione a 0.1°C, in corrente d'acqua.
- Predisposizione con sistema di gestione 4.0 di cantina.
- Software originale JUCLAS.

AREE DI APPLICAZIONE

- Parametrizzazione ed analisi per ogni vino.
- Guida per le decisioni che orientano i processi di cantina.
- Miglioramento della capacità di misurare e monitorare gli input produttivi.
- Miglioramento dell'efficienza interna.
- Monitoraggio dei processi di stabilizzazione e conseguente ottimizzazione.
- Produzione di database caratterizzanti per i vari lotti e le varie annate.

SMARTCHECK®

Technology 4.0 for assessing the tartaric stability of wines.

- + Monitoring of stabilisation processes.
- + Cellar process decision guide.
- + Improved ability to measure and monitor production inputs.

DESCRIPTION

SMARTCHECK® is an innovative instrument designed and manufactured thanks to the interdisciplinary expertise within the **VASONGROUP** research laboratories. The instrument is capable of performing an evaluation of the tartaric stability of wines by means of an analysis based on the principle of the **mini-contact test**, which involves following the fall in conductivity (crystal growth) following the addition of potassium bitartrate to a wine subjected to continuous agitation at low temperature. The analysis with **SMARTCHECK®** can be conducted at 5 different temperatures for the time required by the operator; this makes it a **"direct" instrument** that can be used to carry out more in-depth scientific studies and to run the production stages, by obtaining a specific parameter, even in terms of repeatability. **The results can be viewed in real time on an intuitive three-screen display**, where you can follow the test via temperature indicators and initial, instantaneous and differential conductivity parameters.

STRENGTHS

- The test is performed with a choice of 5 possible temperatures.
- The test can be performed for any length of time.
- Small in size, to be easily placed on a laboratory counter.
- Electronics area protected from condensation and well separated from the fluid area.
- Easy washing of the fluid management area.
- Modulated and automatic precision cooling to 0.1 °C (32.18 °F), in a water stream.
- Setup with 4.0 wine cellar management system.
- Original JUCLAS software.

AREAS OF APPLICATION

- Parameterisation and analysis for each wine.
- A guide for decisions regarding winemaking processes.
- Better measuring and monitoring capacity of production input.
- Improvement of internal efficiency.
- Monitoring of stabilisation processes and subsequent optimisation.
- Production of characterising databases for the various batches and vintages.

SMARTCHECK®

Technologie 4.0 zur Bewertung der Weinsteinstabilität der Weine.

- + Überwachung von Stabilisierungsverfahren.
- + Entscheidungshilfe für die Verfahren im Weinkeller.
- + Verbesserte Fähigkeit zur Messung und Überwachung der Produktionsfaktoren.

BESCHREIBUNG

SMARTCHECK® ist ein innovatives Gerät, das dank des interdisziplinären Know-hows der Forschungslabors der **VASONGROUP** entwickelt und hergestellt wurde. Das Gerät ist in der Lage, die Weinsteinstabilität der Weine durch eine Analyse zu bewerten, die auf dem Prinzip des **Minikontakttests** beruht, bei dem die Abnahme der Leitfähigkeit (Kristallwachstum) nach Zugabe von Kaliumbitartrat zu einem Wein, der bei niedriger Temperatur kontinuierlich gerührt wird, verfolgt wird. Die Analyse mit **SMARTCHECK®** kann bei 5 verschiedenen Temperaturen für die vom Bediener gewünschte Zeit durchgeführt werden, was es zu einem „direkten“ Gerät macht, das sowohl für eingehende wissenschaftliche Studien als auch für die Steuerung von Produktionsphasen durch die Ermittlung eines bestimmten Parameters, auch im Hinblick auf die Wiederholbarkeit, verwendet werden kann. **Die Ergebnisse können in Echtzeit auf einem intuitiven Display** mit drei Bildschirmen angezeigt werden, auf dem Sie den Test über die Parameter Temperatur, Anfangs-, Momentan- und Differenzleitfähigkeit verfolgen können.

STÄRKEN

- Durchführung des Tests bei einer von 5 möglichen Temperaturen.
- Durchführung des Tests zu einer von Ihnen gewählten Zeit.
- Geringe Größe, leicht auf dem Labortisch zu platzieren.
- Elektronischer Bereich vor Kondenswasser geschützt und vom Flüssigkeitsbereich gut getrennt.
- Einfache Reinigung des Flüssigkeitsmanagement-Bereichs.
- Modulierte, automatische Präzisionskühlung auf 0,1°C, im Wasserstrom.
- Vorrüstung für das 4.0-Management-System vom Weinkeller.
- Original JUCLAS-Software.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Parametrisierung und Analyse für jeden Wein.
- Entscheidungshilfe für die Verfahren im Weinkeller.
- Verbesserte Fähigkeit zur Messung und Überwachung der Produktionsfaktoren.
- Verbesserung der internen Effizienz.
- Überwachung von Stabilisierungsverfahren und anschließende Optimierung.
- Erstellung von Charakterisierungsdatenbanken für die verschiedenen Chargen und Jahrgänge.

SMARTCHECK®

Technologie 4.0 pour l'évaluation de la stabilité tartrique des vins.

- + Surveillance des processus de stabilisation.
- + Guide de décision concernant les processus de vinification.
- + Amélioration de la capacité à mesurer et à surveiller les intrants de production.

DESCRIPTION

SMARTCHECK® est un appareil innovant conçu et réalisé grâce à l'expertise interdisciplinaire des laboratoires de recherche de **VASONGROUP**. L'appareil permet d'effectuer une évaluation de la stabilité tartrique des vins au moyen d'une analyse basée sur le principe de **l'essai du mini-contact**. Ce dernier consiste à suivre la chute de la conductivité (croissance des cristaux) à la suite de l'ajout de bitartrate de potassium à un vin soumis à une agitation continue à basse température. L'analyse avec **SMARTCHECK®** peut être effectuée à 5 températures possibles pendant la durée souhaitée par l'opérateur.

Ceci en fait un **appareil « direct »** utilisable aussi bien pour des études scientifiques approfondies que pour régir les étapes de la production en obtenant une valeur spécifique du paramètre, y compris sur le plan de la reproductibilité.

Les résultats sont affichés en temps réel sur un écran intuitif à trois pages, où il est possible de suivre l'essai à l'aide des paramètres de température, de conductivité initiale, instantanée et différentielle.

ATOUTS

- Réalisation de l'essai à 5 températures possibles au choix.
- Réalisation de l'essai pendant une durée au choix.
- Petite taille, facile à placer sur le comptoir de laboratoire.
- Zone électronique protégée contre les condensats et bien séparée de la zone des fluides.
- Facilité de nettoyage de la zone de gestion des fluides.
- Refroidissement modulé et automatique avec précision à 0,1 °C, à l'eau courante.
- Prédiposition avec un système de gestion 4.0 de cave.
- Logiciel original JUCLAS.

DOMAINES D'APPLICATION

- Paramétrage et analyse pour chaque vin.
- Guide de décision qui oriente les processus de vinification.
- Amélioration de la capacité à mesurer et à surveiller les intrants de production.
- Amélioration de l'efficacité interne.
- Surveillance des processus de stabilisation et optimisation conséquente.
- Production de bases de données de caractérisation pour les différents lots et les différents millésimes.

SMARTCHECK®

Tecnología 4.0 para evaluar la estabilidad tartárica de los vinos.

- + Monitorización de los procesos de estabilización.
- + Guía para las decisiones sobre los procesos de bodega.
- + Mejora en la capacidad de medir y monitorizar las entradas de producción.

DESCRIPCIÓN

SMARTCHECK® es una herramienta innovadora concebida y realizada gracias a los conocimientos interdisciplinarios de los laboratorios de investigación de **VASONGROUP**. El instrumento es capaz de realizar una evaluación de la estabilidad tartárica de los vinos mediante un análisis basado en el principio de la prueba de **minicontacto**, que consiste en seguir la caída de la conductividad (crecimiento de cristales) tras la adición de bitartrato de potasio a un vino sometido a agitación continua a baja temperatura. El análisis con **SMARTCHECK®** puede realizarse a 5 temperaturas posibles durante el tiempo que desee el operador, lo que lo convierte en un **instrumento "directo"** que puede utilizarse tanto para estudios científicos en profundidad como para gestionar las etapas de producción mediante la obtención de un parámetro determinado, también en términos de repetibilidad. **Los resultados se pueden visualizar en tiempo real en un panel intuitivo** de tres pantallas, donde se puede seguir la prueba a través de los parámetros de temperatura, conductividad inicial, instantánea y diferencial.

PUNTOS FUERTES

- Realización de la prueba a 5 temperaturas posibles a elegir.
- Realización de la prueba durante un tiempo a elegir.
- Tamaño reducido, fácil de colocar en la mesa del laboratorio.
- Zona electrónica protegida de la condensación y bien separada de la zona de fluidos.
- Fácil lavado de la zona de gestión de fluidos.
- Refrigeración modulada y automática de precisión a 0,1°C, en corriente de agua.
- Inclusión del sistema de gestión de bodega 4.0.
- Software JUCLAS original.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Parametrización y análisis de cada vino.
- Orientación para las decisiones que guían los procesos de bodega.
- Mejora en la capacidad de medir y monitorizar los insumos de producción.
- Mejor eficiencia interna.
- Control de los procesos de estabilización y consiguiente optimización.
- Elaboración de bases de datos de caracterización para los distintos lotes y las diferentes añadas.

SMARTCHECK®

Технология 4.0 для оценки
тартратной стабильности вин.

- Мониторинг процессов стабилизации
- Помощник в принятии решений
- Улучшенный контроль входных параметров

ОПИСАНИЕ

SMARTCHECK® разработан на основе междисциплинарной экспертизы исследовательских лабораторий VASONGROUP. Прибор оценивает тартратную стабильность вин методом мини-контакт-теста: отслеживается снижение электропроводности (рост кристаллов) при добавлении битартрата калия к вину при непрерывном перемешивании и низкой температуре.

SMARTCHECK® относится к технологиям Industry 4.0: оснащён ПО для управления данными и интеграции с системами MES/ERP.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Точная оценка тартратной стабильности методом мини-контакт-теста
- Мониторинг и сравнение нескольких образцов одновременно
- Интеграция Industry 4.0: MES, ERP, прослеживаемость
- Помощь в подборе дозы стабилизаторов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Контроль тартратной стабильности перед розливом
- Мониторинг холодной стабилизации
- Контроль работы электродиализа

МОДЕЛИ

- SMARTCHECK® — цена по запросу (позиция отсутствует в прайсе JUCLAS 2026)
- SmartCheckMini® — компактная версия, цена по запросу

SMARTCHECK®

Tehnologie 4.0 pentru evaluarea stabilității tartrice a vinurilor.

- Monitorizarea proceselor de stabilizare
- Suport în luarea deciziilor
- Control îmbunătățit al parametrilor de intrare

DESCRIERE

SMARTCHECK® a fost dezvoltat pe baza expertizei interdisciplinare a laboratoarelor de cercetare VASONGROUP. Aparatul evaluează stabilitatea tartrică a vinurilor prin metoda mini-contact test: se urmărește scăderea conductivității electrice (creșterea cristalelor) la adăugarea de bitartrat de potasiu în vin, sub agitare continuă și la temperatură scăzută.

SMARTCHECK® face parte din tehnologiile Industry 4.0: este dotat cu software pentru gestionarea datelor și integrarea cu sisteme MES/ERP.

PUNCTE FORTE


- Evaluare precisă a stabilității tartrice prin mini-contact test
- Monitorizarea și compararea mai multor probe simultan
- Integrare Industry 4.0: MES, ERP, trasabilitate
- Sprijin în stabilirea dozei de stabilizatori

DOMENII DE APLICARE

- Controlul stabilității tartrice înainte de îmbuteliere
- Monitorizarea stabilizării la rece
- Controlul funcționării electroodializei

MODELE

- SMARTCHECK® — preț la cerere (poziție absentă din lista JUCLAS 2026)
- SmartCheckMini® — versiune compactă, preț la cerere

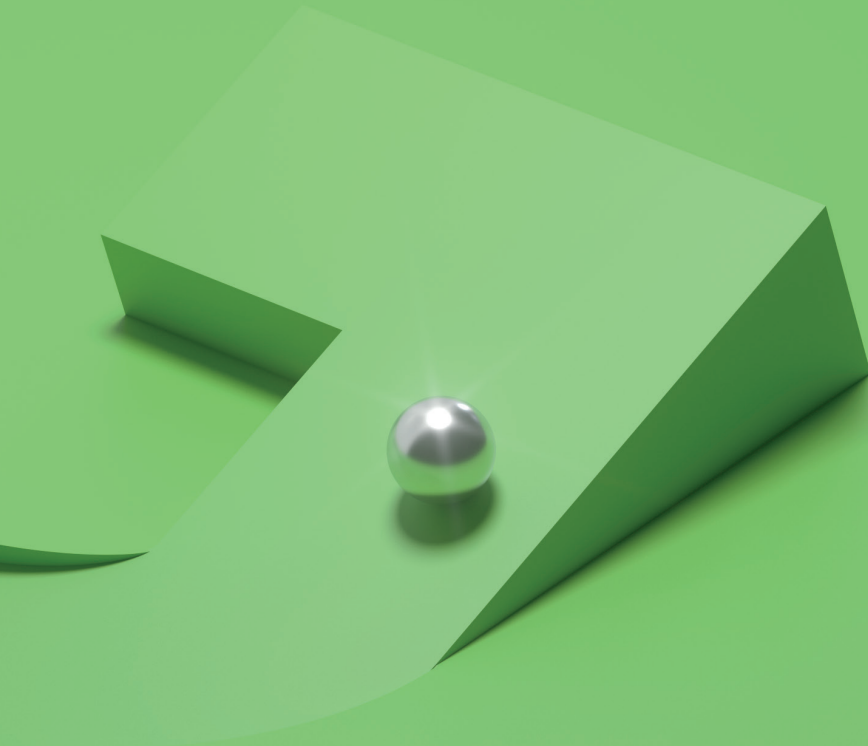

JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

